

Pocket Chamber® Mini Spacer

Til alle typer inhalationsspray



Redefining Patient Care Beyond Expectations

Pocket Chamber® Mini-Spacer er en lille kompakt anti-statisk spacer, som kan bruges sammen med alle gængse inhalationsspray. Spaceren er i lækkert gennemsigtigt design, og er bare 11cm lang.

Redefining Patient Care — Sikkerhed for korrekt brug

For at sikre, at inhalationen foregår korrekt, har Mini-Spaceren en indbygget fløjte/advarselsfunktion, som lyder hvis der inhaleres for hurtigt. Mini-Spaceren har også en indbygget envejs silikone ventil, som forhindrer, at man kan puste ind i spaceren, og at medicin går tabt hvis man må afbryde en inhalation.

Redefining Patient Care — Høj effektivitet og erfaring

Trods den beskedne størrelse, er Mini-Spaceren lige så effektivt som andre spacere. Det skyldes bl.a. det anti-statistiske materiale og et design som sikrer en optimal luftgennemstrømning i spaceren.

Mini-Spaceren er specielt udviklet af en førende virksomhed, med mange års erfaring som leverandør af behandlingstilbehør til astmapatienter.

Redefining Patient Care — Egenskaber og fordele


- **Anti-statisk materiale.** Mini-Spacerens design sikrer, i samspil med det anti-statistiske ABS plastik-materiale, at man får en optimal udnyttelse af medicinen.
- **Fløjte/advarselsfunktion.** Mini-Spacerens indbyggede fløjte/advarselsfunktion sikrer at inhalationen foregår korrekt, og ikke for hurtigt.
- **Envejs ventil.** Envejs ventilen åbner let og sikrer optimal effekt og luftgennemstrømning.
- **Enestående design.** Trods den beskedne størrelse, er Mini-Spaceren lige så effektivt som andre spacere. Kompakt lækkert design.
- **Flexibelt endestykke.** Mini-Spaceren kan bruges til alle gængse inhalationsspray.
- **Masker til Mini-Spacer.** Lækre silicone masker i 4 størrelser. Latex-fri med envejs ventil.



Redefining Accuracy. Beyond Expectations.

Pocket Chamber Mini-Spacer er designet, så man får en effektiv udnyttelse af medicinen til den lavest mulige pris.

Pocket Chamber Mini-Spacer har et flexibelt endestykke, så den passer til alle gængse inhalationsspray.

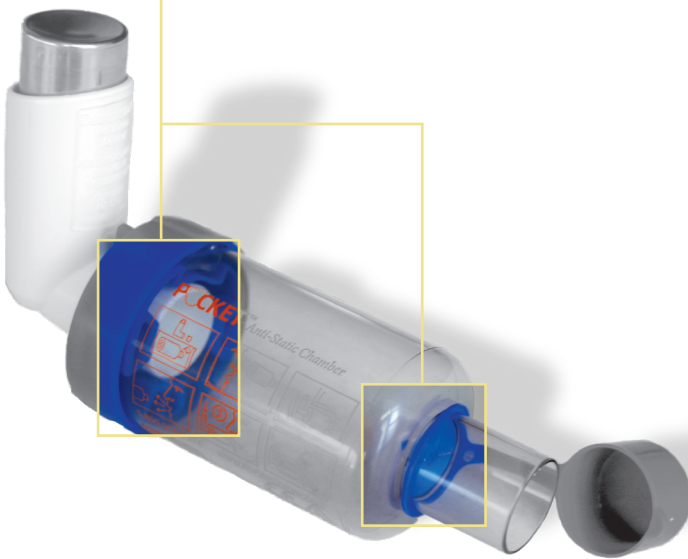

Dansk distributør:

JepsenHealthCare

Telefon: 4499 1432
Email: info@jepsenhealthcare.dk
Web: www.jepsenhealthcare.dk

Danske varenumre

Pocket Chamber Mini-Spacer
POCHAM Pocket Chamber Mini-Spacer

Pocket Mask - Masker til Pocket Chamber Mini-Spacer
POCHAMMAS1 Orange, Baby (cirka 0-1 år)
POCHAMMAS2 Gul, Mindre børn (cirka 1-8 år)
POCHAMMAS3 Blå, Større børn (cirka 9-15 år)
POCHAMMAS4 Grøn, Voksne (cirka 16 år+)

Pocket Chamber Mini-Spacer m/ Maske til Apoteker
210673 Mini-Spacer m/ Orange Maske, Baby (cirka 0-1år)
210675 Mini-Spacer m/ Gul Maske, Small (cirka 1-8 år)
210676 Mini-Spacer m/ Blå Maske, Medium (cirka 9-15 år)
210677 Mini-Spacer m/ Grøn Maske, Large (cirka 16 år+)



©Copyright nSpire Health 2009. Due to continual innovations, nSpire Health reserves the right to change specifications without notice. Pocket Chamber is a registered trademark of nSpire Health.

Tekniske specifikationer

Størrelse:
108 x 47.5 mm

Volume:
110 ml

Mundstykke:
22mm OD

Vægt:
33 gram

Materialer:
100% latex-fri; silicone, anti-statisk ABS plastik, PVC og polypropylene

Patient information:
Udførlig dansk brugervejledning er vedlagt.
Yderligere information på www.jepsenhealthcare.dk

Rengøring:
Både Mini-Spaceren og masker vaskes løbende i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.

Relaterede produkter

Pocket Mask™ - Masker til Pocket Chamber Mini-Spacer

For at opnå den bedste effekt af medicinen, bruges Mini-Spaceren normalt sammen med en af de tilhørende latex-fri silicone masker. Maskerne er gennemsigtige, og har en envejs ventil så brugeren kan ånde ud mens masken er i brug. Det giver bedre tryghed og gør masken lettere at bruge.

De lækre masker er gennemsigtige og findes i 4 størrelser; Baby (orange), Mindre børn (gul), Større børn (blå) og Voksen (grøn).



Contact Information

nSpire Health Ltd.
Unit 10 Harforde Court
John Tate Road
Hertford SG13 7NW, UK
Tel: +44 (0) 1992 526300
info@nspirehealth.com

nSpire Health GmbH
Schlimpfhofer Straße 14
97723 Oberthulba, Germany
Tel: +49 (0) 9736 8181-0
vertrieb@nspirehealth.com

www.nspirehealth.com